



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DAS MEDICAÇÕES EM SPRAY COM ESPAÇADOR



USO DO ESPAÇADOR

- Fixar corretamente a máscara face da criança;
- Agitar o frasco da medicação;
- Apertar a medicação já conectada ao espaçador, segurar a máscara no rosto e contar dez respirações ou vinte segundos.

Realizar um jato de cada vez, repetindo a orientação anterior.

USO DA MEDICAÇÃO

- Anotar a data de início da medicação, e quando esta for de uso diário a data do término também, na caixa para não ultrapassar a quantidade exata do remédio;
- Realizar higiene oral e da face após o uso da medicação.

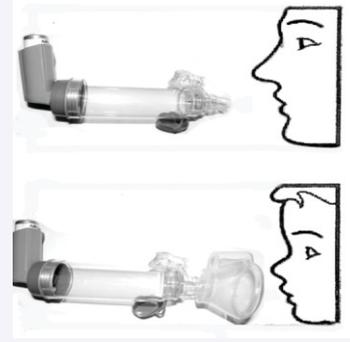
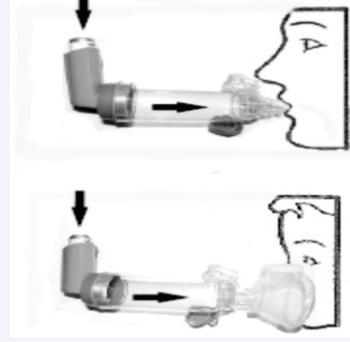
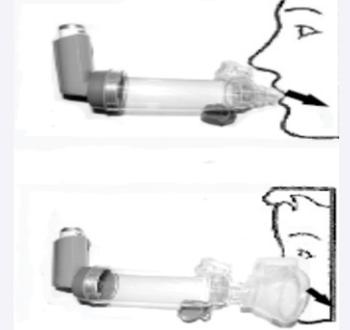
LIMPEZA DO ESPAÇADOR

- Lavar uma vez por semana, retirando a máscara e sem retirar a válvula do espaçador;
- A máscara deve ser lavada em água à temperatura ambiente;
- O restante do espaçador deverá permanecer de molho durante 10 a 15 minutos em água morna com detergente neutro (cerca de 4 gotas para 1 litro de água);
- Não utilizar álcool ou água quente! Não utilizar buchas ou esponjas para a limpeza dos espaçadores;
- Nenhuma peça do espaçador deve ser esfregada para secar;
- As peças deverão secar naturalmente;
- Tenha cuidado ao manusear a câmara, pois, em caso de fortes impactos, ela pode rachar ou, até mesmo, quebrar.



NOÇÕES DE USO DO ESPAÇADOR

Siga atentamente todas as instruções para uso do espaçador:

	<p>1 Retire a tampa protetora do spray e verifique, visualmente, se há algum corpo estranho dentro da câmara.</p>
	<p>2 Introduza o spray na parte traseira da câmara.</p>
	<p>3 Certifique-se de estar firmemente encaixado.</p>
	<p>4 Introduza o bocal da câmara na boca ou encaixe a máscara na ponta do bocal e aplique-a à face.</p> <p>OBS.: O bocal é utilizado em pacientes maiores de 5 anos. Para pacientes menores deve-se utilizar sempre a máscara.</p>
	<p>5 Pressione o spray no início da inspiração. Aspire a dose e pare de respirar durante o período de 5 a 10 segundos ou mantenha a máscara bem vedada durante 20 segundos.</p>
	<p>6 De acordo com instruções previamente fornecidas por seu médico, aguarde 30 segundos antes de repetir as etapas 4, 5 e 6. Para retirar o spray da parte traseira da câmara fixe a base com uma das mãos e retire o spray.</p>