



LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CAMPINAS




ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE FEZES PARA EXAME DO GRUPO 9 –PARASITOLOGIA (frasco específico com formol)

Coletar as fezes com a pá coletora fornecida no kit na proporção correta e depois dissolver bem as fezes no líquido contido no frasco. Fechar bem o frasco, mantendo-o sempre em pé.

Cuidados: Manter o frasco fora do alcance de crianças e não descartar o conservante. Não beber o líquido conservante e evitar contato com os olhos e nariz. Não coletar fezes em excesso, pois o líquido conservante (Formalina tamponada) deve cobrir a amostra.

Não deixar o frasco exposto ao sol e armazenar entre 15 e 30°C.

QUANTIDADE DE FEZES QUE DEVERÁ SER COLOCADA NO FRASCO		
Fabricante	Fezes Diarreicas	Fezes Formadas
PARATEST	Coletar 06 colheres do kit	Coletar 02 cones da pá coletora
COPROPLUS	Coletar 02 colheres equivalentes a de sobremesa	Coletar 01 cone da pá coletora

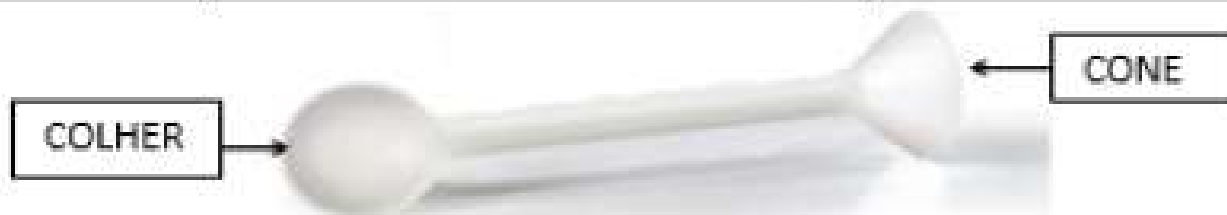

Não é necessário refrigerar a amostra. Entregar na Unidade de Saúde em até 07 dias após a coleta.